

Les sparadraps hypoallergéniques 3M Protection et soins de la peau

Une gamme complète...



...de sparadraps adaptés
à tous vos besoins

3M™ Micropore

Sparadrap microporeux



Doux à la peau

Support : viscose non tissée

- Hypoallergénique
- Doux
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Peut être annoté
- Couleurs : blanc ou chair

Adhésif :


- Polyacrylate à très haute tolérance cutanée
- Ne laisse pas de résidus adhésifs

Indications :

- Pansements simples et peu épais
- Pansements sur peau fragile (visage et oeil)
- Pansements fréquemment renouvelés
- Fixation de supports de poches de stomies ou autre dispositif

Adhérence :

- Progressive, médiane et bien tolérée par les peaux fragiles
- Stable dans le temps

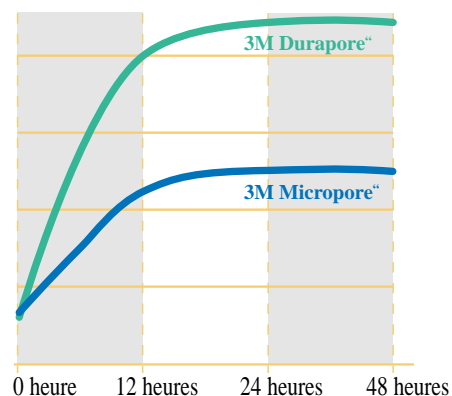

3M™ Medipore™

Sparadrap multi-extensible



Disponible en 2 versions Prédécoupé ou avec support papier

Support : Polyester non tissé

- Hypoallergénique
- Doux
- Très souple
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Ne se froisse pas, limitant le gâchis
- Se pose sans étirement pour une bonne tolérance cutanée

Dans sa version prédécoupée tous les 5 cm, il s'utilise facilement et rapidement sans ciseaux (exclusivité 3M).

Adhésif :


- Polyacrylate

Indications :

- Fixation de pansements post-chirurgicaux
- Pansements sur articulations et reliefs anatomiques
- Pansements de plaies chroniques de longue durée
- Fixation de dispositifs médicaux

Adhérence :

- Rapide et forte

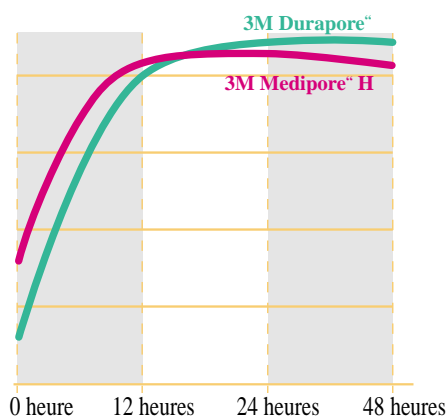

3M™ Transpore™

Sparadrap plastique micro-perforé



Transparent et facile à découper sans ciseaux

Support : film de polyéthylène

- Hypoallergénique
- Facile à découper sans ciseaux dans les deux sens
- Laisse passer l'air et la vapeur d'eau
- Transparent
- Élastique

Adhésif :


- Polyacrylate hypoallergénique
- Peu traumatique au retrait

Indications :

- Fixation de pansements épais comme les pansements oculaires
- Fixation sûre et rapide de sondes, drains, tubulures et cathéters
- Permet la surveillance des dispositifs médicaux fixés par transparence

Adhérence :

- Rapide
- Médiane
- Bien tolérée par les peaux fragiles

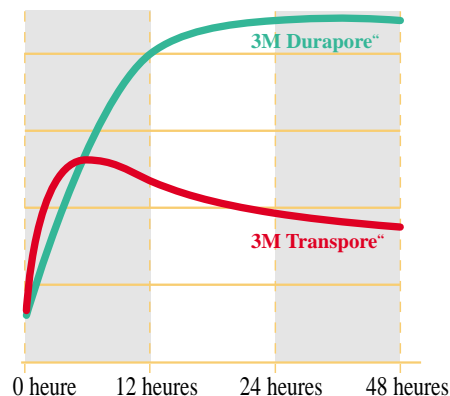

3M™ Blenderm™

Sparadrap
transparent occlusif



Imperméable

Support : film de polyéthylène étanche

- Hypoallergénique
- Transparent et flexible
- Complètement occlusif, étanche à l'eau, à l'air et aux souillures

Adhésif :


- Polyacrylate
- Très bien toléré par les peaux sensibles

Indications :

- Protection de pansements contre la contamination exogène
- Protection en balnéothérapie
- Traitement de lésions dermatologiques
- Couverture de topiques en dermatologie
- Protection de patch-tests allergologiques, de vaccins...

Adhérence :

- Rapide
- Dégressive (pas de lésions au retrait)

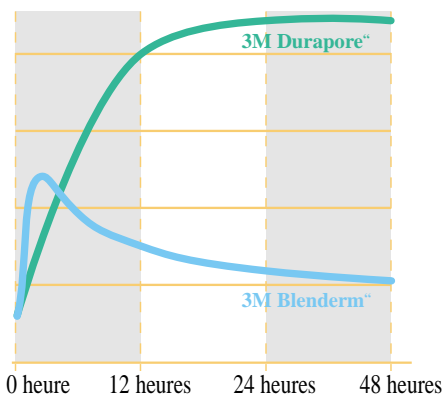

3M™ Durapore™

Sparadrap tissé



Multi-usages

Support : taffetas de viscose

- Hypoallergénique
- Laisse passer l'air et la vapeur d'eau
- Tissé
- Facile à découper dans les deux sens
- Très résistant
- Peut être annoté

Adhésif :


- Polyacrylate hypoallergénique
- Ne laisse pas de résidus sur la peau

Indications :

- Fixation de pansements même volumineux
- Fixation de dispositifs médicaux pesants :
 - Poches de stomie
 - Tubulures
 - Sondes de trachéotomie
- Confection d'attelles de doigt


Adhérence :

- Forte
- Durable

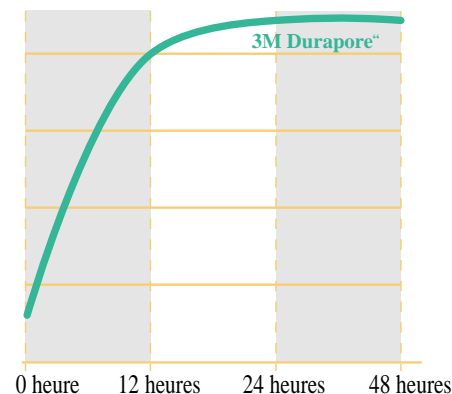

3M™ Microfoam™

Sparadrap mousse

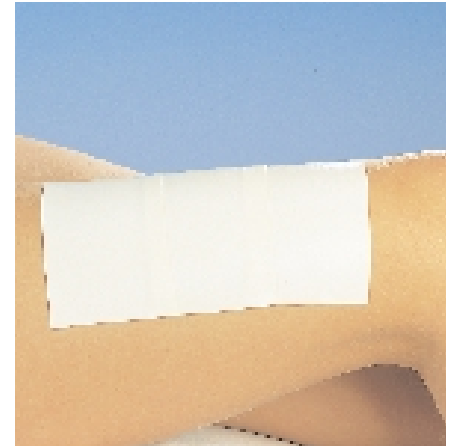

Élastique

Support : Mousse de polyvinyle

- Hypoallergénique
- Très souple
- Étanche à l'eau
- Laisse passer air et vapeur d'eau
- Peut être annoté

Adhésif :


- Polyacrylate
- Pas de lésion au retrait

Indications :

- Fixation de pansements post-opératoires : chirurgie viscérale et orthopédique
- Pansements compressifs en chirurgie vasculaire et en chirurgie mammaire
- Soutien articulaire
- Protection des reliefs osseux sous contention rigide (plâtre ou résine)

Adhérence :

- Rapide, assez forte
- Légèrement dégressive

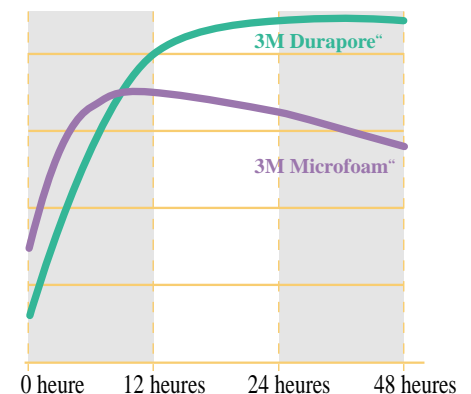

Les sparadraps hypoallergéniques 3M

Une gamme complète de sparadraps adaptés à tous vos besoins

La peau est un organe complexe et essentiel, qui doit être maintenue en bonne condition.

Or certains patients, tels que les jeunes enfants ou les personnes âgées, ont une peau délicate, à risques. C'est pourquoi, de petites choses comme le choix d'un sparadrap peuvent rapidement prendre de l'importance. 3M, en tant que premier fabricant mondial de sparadraps, met à la disposition des professionnels de santé une large gamme

de produits adaptés à chaque situation.

Ils bénéficient des dernières recherches en matière :

- de supports : leur perméabilité à l'air permet à la peau de respirer et évite la macération
- d'adhésifs, à base de polyacrylate hypoallergénique, qui limitent l'irritation cutanée.

Enfin, le recours à des adhésifs sélectifs permet un échange optimal d'humidité ainsi qu'une excellente adhérence.

Règles de bonne utilisation



Bien centrer le pansement sur la plaie et le lisser du centre vers la périphérie sans l'étirer



Assurer sa fixation en l'appuyant ou le lissant fermement en place. L'adhésif est sensible à la pression.



Ne jamais étirer lors de la pose. Cela pourrait entraîner des lésions cutanées telles que des phlyctènes ou une abrasion.

Retrait



Soulever un angle du pansement et décoller dans le sens de pousse des poils.



Rester parallèle à la surface de la peau en retirant lentement le sparadrap et en maintenant la peau de l'autre main.

Code Commande	Référence Produit	Dimensions m x cm	Nombre de Rouleaux par boîte
---------------	-------------------	-------------------	------------------------------

3M™ Micropore™ - sparadrap microporeux non tissé hypoallergénique

Présentation en rouleaux nus			
MI912	1530	9,14 x 1,25	24
MI925		9,14 x 2,50	12
MI950		9,14 x 5,00	6
MI975		9,14 x 7,50	4
MICH925	Chair	9,14 x 2,50	12
MI512		5,00 x 1,25	48
MI525		5,00 x 2,50	24
MI550		5,00 x 5,00	12
MI575		5,00 x 7,50	8

Présentation avec flasques protecteurs			
MICRO12	1530R	9,14 x 1,25	18
MICRO20		9,14 x 2,00	12
MICRO45		9,14 x 4,50	6

Présentation avec dévidoirs			
MIDEV12	1535	9,14 x 1,25	24
MIDEV25		9,14 x 2,50	12
MIDEV50		9,14 x 5,00	6
MIDEV75		9,14 x 7,50	4

3M™ Transpore™ - sparadrap plastique microporeux hypoallergénique

Présentation en rouleaux nus			
TR912	1527	9,14 x 1,25	24
TR925		9,14 x 2,50	12
TR950		9,14 x 5,00	6
TR975		9,14 x 7,50	4
TR512		5,00 x 1,25	48
TR525		5,00 x 2,50	24
TR550		5,00 x 5,00	12
TR575		5,00 x 7,50	8

Présentation avec flasques protecteurs			
TRANS12	1527R	9,14 x 1,25	18
TRANS20		9,14 x 2,00	12
TRANS45		9,14 x 4,50	6

Note : Ces sparadraps peuvent être éliminés avec les déchets ménagers suivant le protocole en place dans votre établissement.

Quelques trucs et astuces

- Choisir le sparadrap qui correspond le mieux aux besoins du patient, car aucun sparadrap ne répond à toutes les indications.
- Toujours poser le sparadrap sur une peau sèche et exempte de résidus de savons, de produits chimiques et d'huiles. Si la peau est moite l'adhérence sera moindre.
- Utiliser un sparadrap élastique comme le 3M Microfoam si un oedème est prévisible ou si un pansement compressif ou de contention est prescrit.

Code Commande	Référence Produit	Dimensions m x cm	Nombre de Rouleaux par boîte
---------------	-------------------	-------------------	------------------------------

3M™ Blenderm™ - sparadrap support plastique transparent occlusif hypoallergénique

BLE12	1525	4,57 x 1,25	24
BLE25		4,57 x 2,50	12
BLE50		4,57 x 5,00	6

3M™ Durapore™ - sparadrap tissé hypoallergénique

Présentation en rouleaux nus			
DUR12	1538	9,14 x 1,25	24
DUR25		9,14 x 2,50	12
DUR50		9,14 x 5,00	6
DUR75		9,14 x 7,50	4

Présentation avec flasques protecteurs			
DURA12		9,14 x 1,25	18
DURA20		9,14 x 2,00	12
DURA45		9,14 x 4,50	6

3M™ Medipore™ - sparadrap multi-extensible non tissé hypoallergénique prédécoupé

Présentation en boîte individuelle			
2961 BI		9,14 x 2,50	2
2962 BI		9,14 x 5,00	1
2964 BI		9,14 x 10,00	1
2966 BI		9,14 x 15,00	1

3M™ Medipore™ - sparadrap multi-extensible non tissé hypoallergénique (avec support "papier")

Présentation sous film			
MEDIP02	2991/6	10,00 x 2,50	48
MEDIP05	2991/1	10,00 x 5,00	24
MEDIP10	2991/2	10,00 x 10,00	12
MEDIP15	2991/3	10,00 x 15,00	12
MEDIP20	2991/4	10,00 x 20,00	6
MEDIP30	2991/5	10,00 x 30,00	6

3M™ Microfoam™ - sparadrap mousse hypoallergénique

FOA25	1528	5,00 x 2,50	12
FOA50		5,00 x 5,00	6
FOA75		5,00 x 7,50	4
FOA10		5,00 x 10,00	3

* No Sting Barrier Film



Laboratoires 3M Santé
Département Marchés Hospitaliers

Boulevard de l'Oise
95029 Cergy Pontoise Cedex
France
Tél.(0)1.30.31.82.82
Fax (0)1.30.31.83.83

3M, Durapore, Transpore, Micropore, Blenderm, Microfoam, Medipore, Tegaderm et Cavilon sont des marques commerciales de la société 3M.